




LEGIO.ball: Стартовый набор с антибакт. вставкой-регулятором струи



LEGIO.ball: Набор картриджей с антибакт. вставкой-регулятором струи

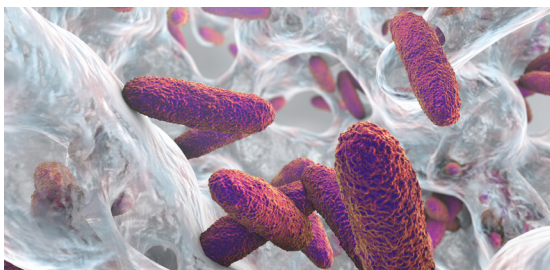

LEGIO.ball: Фильтр для мойки антибактериальный

Фильтр LEGIO.ball – идеальное решение для моек при использовании водопроводной воды с микробиологическими загрязнениями или в тех случаях, когда требуется широкомасштабная защита.

Области применения:

- Зоны риска в больницах с пациентами, имеющими ослабленный иммунитет, также для зон повышенной безопасности (стерильно упакованная версия находится на стадии подготовки)
- Общественные здания, например, детские сады, начальные школы, дома престарелых и тюрьмы
- Жилищное строительство / личное использование

Преимущества фильтров для мойки LEGIO.ball

- Подтвержденная эффективность в борьбе с легионеллезом и другими бактериями
- Сертификаты немецких и европейских организаций
- Длительный срок использования до **70 суток** (в зависимости от качества подаваемой воды)
- **Антибактериальный выпуск высокой эффективности**
- Высокая пропускная способность, в том числе при низком напоре воды
- Простой монтаж
- Быстрая замена фильтров без использования инструментов
- Разнообразные соединительные адаптеры и крепления для любого варианта применения
- Корпус “Made in Germany”, фильтрующий модуль “Made in Holland”
- Допуски KTW и DVGW W270
- Прочный корпус с двойными стенками
- Стойкость ко всем основным дезинфицирующим средствам, используемым в больницах



Интенсивное очищение для воды в клиниках

Фильтр для мойки

LEGIO.ball антибактериальный

Медицинские фильтры

Технические характеристики и показатели эффективности фильтровальных картриджей

Номер модели	41.2.801	32.1.900
		
Тип	LEGIO.ball Стартовый набор для мойки вкл. мембранный картридж	LEGIO.ball Набор картриджей вкл. нижнюю полусферу
Макс. размеры	Ø 110 x 87 мм	Ø 110 x 80 мм
Вес прикл.	390 г	220 г
Металлическая резьба, интегрированная в верхнюю полусферу	в M22 IG	
Пропускная способность при давлении 2 бар	до 12 л/мин ⁽¹⁾	до 12 л/мин ⁽¹⁾
Подтвержденный срок службы	70 дней (10 недель)	70 дней (10 недель)
Фильтрация бактерий и грибов ⁽²⁾	бактерии > LOG 7 грибки > LOG 4	бактерии > LOG 7 грибки > LOG 4

⁽¹⁾ Возможно ограничение пропускной способности до 6 и 8 л.


⁽²⁾ Дополнительную информацию Вы найдете в протоколе квалификационных испытаний.

Материалы и технические характеристики мембранного картриджа

Фильтрующий материал	Смесь из полиэфирсульфона и поливинилпирролидона
Размер пор	0,2 мкм
Макс. рабочее давление	5 бар
Рабочая температура	0 - 60 °C ; 70 °C в течение 30 мин при 2 бар во время эксплуатации
Поглощение хлора	1200 млн-1, в общей сложности 10 часов во время эксплуатации
Расход	3 000 л во время эксплуатации
Хранение и обращение	<ul style="list-style-type: none"> • хранить в сухом месте; после первого использования беречь от мороза • обращаться с осторожностью; не подвергать сильным сотрясениям • дезинфекция поверхности на основе алкоголя и пероксидов • после использования можно утилизировать с бытовыми отходами
Замена картриджа	Необходимо соблюдать инструкции по замене картриджа
Комплект поставки	Вкл. календарь замены картриджа и водостойкие наклейки
Рекомендация	снимать LEGIO.ball на время термической дезинфекции

Сертификация продукта

LEGIO.ball соответствует требованиям закона о медицинских продуктах 93/42/ЕЕС, Приложение VII и зарегистрирован как продукт класса I, норма I. Кроме того, LEGIO.ball сертифицирован в соответствии с **Положением КТВ** федерального ведомства по экологии, а также согласно **рабочим рекомендациям DVGW W 270**.

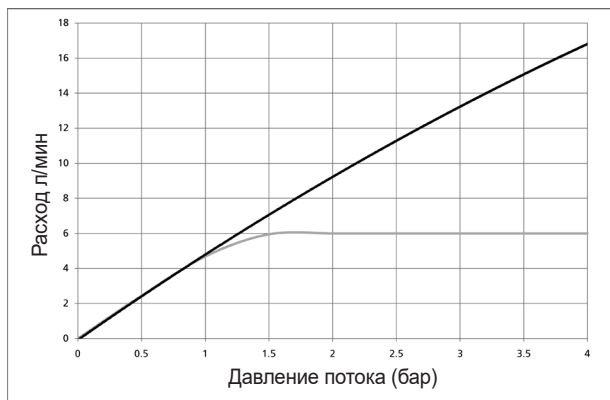

Мембранная часть была проверена в голландской независимой испытательной лаборатории Vitens и в лаборатории HYTECON, Бёнен, на предмет удержания легионеллы (а также других бактерий). Результаты показывают, что LEGIO.ball отвечает всем стандартам водной промышленности. Это подтверждается также в экспертном заключении профессора д-ра Мартина Экснера из Института гигиены и общественного здоровья, Бонн. Обзор результатов испытаний и технические спецификации мембранной части Вы можете найти в протоколе квалификационных испытаний.

Все продукты и детали производства LEGIO проходят строгий контроль качества. Каждый продукт отдельно проверяется на работоспособность и эффективность.

Полимерные материалы корпуса и мембранной части соответствуют положениям КТВ.

Латунные адаптеры удовлетворяют текущим нормам немецкого института меди в отношении утечки свинца.

Исключение ответственности:

Указанная в данном документе информация и данные базируются на нашем общем опыте и считаются корректными. Они указываются с должной добросовестностью и носят рекомендательный характер по выбору и применению наших продуктов. Поскольку условия, при которых могут применяться наши продукты, находятся вне нашего контроля, эта информация не дает гарантии окончательных характеристик продукта, и мы не принимаем на себя ответственности в отношении применения наших продуктов. Качество наших продуктов гарантировано в соответствии с нашими условиями продажи. Существующие (промышленные, интеллектуальные или иные) охраняемые права подлежат соблюдению.



Производство и продажа LEGIO.tools GmbH
Schlattgrabenstr. 10 • DE-72141 Walddorfhäslach • Deutschland /
Германия
Тел.: +49 7127 1806-0 • Факс: +49 7127 1806-222
Эл. почта: info@legio.com • www.legio.com

