



## Области применения

Душевой фильтр – идеальное решение при вспышках легионеллеза или в тех случаях, когда требуется широкомасштабная защита.

Возможности использования:

- Промышленные здания, например, спортивные сооружения и отели
- Общественные здания, например, детские сады, начальные школы, дома престарелых и тюрьмы
- Санитарные зоны в производственных и административных зданиях
- Рекреационные и досуговые сооружения, например, курорты, прогулочные катера и жилые вагончики
- Мотели и летние домики
- Жилищное строительство для личных целей
- Зоны риска в больницах с пациентами, имеющими ослабленный иммунитет



LEGIO.brausefilter Deluxe

## Антилегионеллезный душевой фильтр



Сменный мембранный картридж LEGIO



- Подтвержденная эффективность в борьбе с легионеллезом и другими бактериями
- Сертификаты немецких и европейских организаций
- Длительный срок использования до **70 суток** (в зависимости от качества подаваемой воды)
- Высокая пропускная способность, в том числе при низком напоре воды
- Простой монтаж на любые душевые шланги
- Быстрая замена фильтров без использования инструментов
- Привлекательное неброское хромирование
- Донце душа с утолщениями

Защита воды в Вашем душе от бактерий

## Антилегионеллезный душевой фильтр

## Медицинские фильтры

Технические характеристики и показатели эффективности фильтровальных картриджей

Номер модели	32.2.100	32.1.500 ICF
		
Тип	Душевой фильтр Deluxe: Стартовый набор для мойки вкл. мембранный картридж	Сменный картридж Стандарт ICF
Макс. размеры	280 x 105 x 75 мм	DM 80 x 75 мм
Вес прибл.	415 г	110 г
Соединение	Наружная резьба 1/2"	Использование
Пропускная способность при давлении 2 бар	до 12 л/мин <sup>(1)</sup>	до 12 л/мин <sup>(1)</sup>
Подтвержденный срок службы	70 дней (10 недель)	70 дней (10 недель)
Фильтрация бактерий и грибов <sup>(2)</sup>	бактерии >LOG 7 грибки >LOG 4	бактерии >LOG 7 грибки >LOG 4


<sup>(1)</sup> Возможно ограничение пропускной способности до 6 и 8 л. <sup>(2)</sup> Дополнительную информацию Вы найдете в протоколе квалификационных испытаний.

### Материалы и технические характеристики мембранного картриджа

Фильтрующий материал	Смесь из полиэфирсульфона и поливинилпирролидона
Размер пор	0,2 мкм
Макс. рабочее давление	5 бар
Рабочая температура	0 - 50 °C ; 70 °C в течение 30 мин при 2 бар во время эксплуатации
Поглощение хлора	1200 млн-1, в общей сложности 10 часов во время эксплуатации
Расход	3 000 л во время эксплуатации
Хранение и обращение	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Хранить в сухом месте; после первого использования беречь от мороза</li> <li>• Обращаться с осторожностью; не подвергать сильным сотрясениям</li> <li>• Дезинфекция поверхности на основе алкоголя и пероксидов</li> <li>• После использования можно утилизировать с бытовыми отходами</li> </ul>
Замена картриджа	Необходимо соблюдать отдельные инструкции по замене картриджа
Комплект поставки	вкл. календарь замены картриджа и водостойкие наклейки.
Рекомендация	Снимать фильтр для душа на время термической дезинфекции

### Сертификация продукта

LEGIO.bräusefilter Deluxe соответствует требованиям закона о медицинских продуктах 93/42/EEC, Приложение VII и зарегистрирован как продукт класса I, норма I.

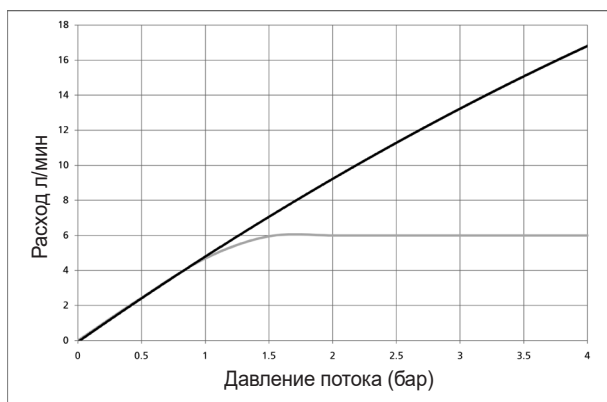

Фильтры LEGIO.bräusefilter были проверены в независимой испытательной лаборатории Vitens в отношении противодействия легионеллезу и выполняют все действующие в водной промышленности стандарты.

Все продукты и детали производства LEGIO проходят строгий контроль качества. Каждый продукт отдельно проверяется на работоспособность и эффективность.

Обзор результатов испытаний и технические спецификации мембранной части Вы можете найти в протоколе квалификационных испытаний.

Для клинического применения пользуйтесь преимущественно нашими медицинскими фильтрами LEGIO.medizinfilter.

#### Исключение ответственности:

Указанная в данном документе информация и данные базируются на нашем общем опыте и считаются корректными. Они указываются с должной добросовестностью и носят рекомендательный характер по выбору и применению наших продуктов. Поскольку условия, при которых могут применяться наши продукты, находятся вне нашего контроля, эта информация не дает гарантии окончательных характеристик продукта, и мы не принимаем на себя ответственности в отношении применения наших продуктов. Качество наших продуктов гарантировано в соответствии с нашими условиями продажи. Существующие (промышленные, интеллектуальные или иные) охраняемые права подлежат соблюдению.